



Emballagelijst Stichting Waterproef

Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem

Dijkgraaf Poschlaan 6 - 1135 GP Edam

T 0299 39 17 00 - info@waterproef.nl - waterproef.nl

Dit document bevat alle verpakkingen in gebruik bij Waterproef.
Hier volgt een uitleg hoe de emballagelijst werkt.

Het eerste gedeelte bestaat uit een overzicht van de analyses.
Het overzicht is uitgesplitst in drie categorieën:
analyses in water vanaf pagina 2, analyses in vaste matrix vanaf pagina 8 , veldmetingen vanaf pagina 11
Zoek in de betreffende categorie de analyse op, deze is gesorteerd op analyse groepen.

Achter de gekozen analyse staat een verpakkingscode.
Vanaf pagina 12 is een overzicht waarin vermeld staat welke verpakking u nodig heeft.
Hou de bijbehorende vulinstructie aan.

Analyse overzicht

Water (Oppervlaktewater, grondwater, afvalwater)

Test	Opmerking	Verpakking
Analyse automaat		
Chloride mbv discrete analyser		2ng2f
Filtreren voor kjn en tp analyses		2nb2zs2f
Nitriet mbv discrete analyser		2ng2f
Ortho-fosfaat mbv discrete analyser		www4nc
Ortho-fosfaat zonder filtratie		2nz3po4
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof		2nb2zs2
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof na filtratie		2nb2zs2f
Som Nitriet+Nitraat mbv discrete analyser		2ng2f
Sulfaat mbv discrete analyser		2ng2f
Totaal fosfor na filtratie		2nb2zs2f
Totaal-fosfor in afvalwater		2nb2zs2
Totaal-fosfor in water		2nb2zs2
Administratie		
covid bemonstering		2wb4
Berekende test		
Nitraat mbv discrete analyser		2ng2f
Test t.b.v. het nemen van de juiste verpakking tijdens de bemonstering		gnr5or60
Totale hardheid in water		2nw2zn2
verpakking aangeleverd extract	0	zzz1
Gravimetrie		
Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen		www5gr
Onopgeloste bestanddelen		www5gr
Onopgeloste bestanddelen in actief slib		www5gr
Onopgeloste bestanddelen, lage bepalingsgrens	Let op: 2 verpakkingen	www5gr
Microbiologie		
E-Coli , MPN- methode		2nr2bact

Water (Oppervlaktewater, grondwater, afvalwater)

Test	Opmerking	Verpakking
Intestinale enterococcen, MPN-methode		2nr2bact
Metalen		
Aluminium in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Aluminium in water		2nw2zn2
Aluminium na filtratie		2nz2zn2
Antimoon gefiltreerd in water		2nz2zn2
Antimoon in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Antimoon in water		2nw2zn2
Arseen gefiltreerd in water		2nz2zn2
Arseen in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Arseen in water		2nw2zn2
Barium gefiltreerd in water		2nz2zn2
Barium in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Barium in water		2nw2zn2
Berillium in water		2nw2zn2
Beryllium in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Beryllium na filtratie		2nz2zn2
Cadmium gefiltreerd in water		2nz2zn2
Cadmium in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Cadmium in water		2nw2zn2
Calcium gefiltreerd in water		2nz2zn2
Calcium in water		2nw2zn2
Chroom gefiltreerd in water		2nz2zn2
Chroom in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Chroom in water		2nw2zn2
Cobalt gefiltreerd in water		2nz2zn2
Cobalt in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Cobalt in water		2nw2zn2
Fosfor in porievocht		4dz3por
IJzer gefiltreerd in water		2nz2zn2
IJzer in afvalwater na destructie		2nw2zn2
IJzer in porievocht		4dz3por
IJzer in water		2nw2zn2
Kalium gefiltreerd in water		2nz2zn2
Kalium in water		2nw2zn2
Koper gefiltreerd in water		2nz2zn2
Koper in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Koper in water		2nw2zn2
Kwik in afvalwater na destructie		2nw2zn2

Water (Oppervlaktewater, grondwater, afvalwater)

Test	Opmerking	Verpakking
Kwik in water		wnz2hg
Kwik in water na filtratie		wnz2hgf
Lood gefiltreerd in water		2nz2zn2
Lood in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Lood in water		2nw2zn2
Magnesium gefiltreerd in water		2nz2zn2
Magnesium in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Magnesium in water		2nw2zn2
Mangaan in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Mangaan in water		2nw2zn2
Molybdeen gefiltreerd in water		2nz2zn2
Molybdeen in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Molybdeen in water		2nw2zn2
Natrium gefiltreerd in water		2nz2zn2
Natrium in water		2nw2zn2
Nikkel gefiltreerd in water		2nz2zn2
Nikkel in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Nikkel in water		2nw2zn2
Seleen na filtratie		2nz2zn2
Thallium na filtratie		2nz2zn2
Tin in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Tin na filtratie		2nz2zn2
Uranium na filtratie		2nz2zn2
Vanadium in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Vanadium in water		2nw2zn2
Vanadium in water na filtratie		2nz2zn2
Zilver in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Zilver na filtratie		2nz2zn2
Zink gefiltreerd in water		2nz2zn2
Zink in afvalwater na destructie		2nw2zn2
Zink in water		2nw2zn2
Zwavel in porievocht		4dz3por
Natchemisch		
Anaerobe fosfaatafgifte		www5po4
Bepaling blauwalg met fluoroprobe tbv zwemwater		3wz3flprob
Bepaling van blauwalgen m.b.v. fluoroprobe		3wz3flprob
Bezinking met maatcilinder		www5bez
Bezinksel		www5bez
biochemisch zuurstof verbruik mbv LDO sensor	Lucht vrij afvullen	1ww4bzbv

Water (Oppervlaktewater, grondwater, afvalwater)

Test	Opmerking	Verpakking
Biochemisch zuurstofverbruik over 19 dagen	<i>Lucht vrij afvullen</i>	www5bzbv19
Biochemisch zuurstofverbruik, extra emballage		2nz3bzbv
Bromaat na filtratie		2nm2
Bromide na filtratie		2ng2
Chemisch zuurstofverbruik		2nb2zs2
Chemisch zuurstofverbruik na filtratie		2nb2zs2
Chemisch zuurstofverbruik na filtratie over 1,6 µm		www5nc
chlorofyl-a en faeofytine		2wg5
DOC (Opgelost organisch koolstof)		2ng2doc
EGV bij 25 graden (lab.meting)		2nz3nc
Extinctiemeting bij 254 nm		2ng2f
Filtratie DNA analyse UvA methode		5wp5dna
Filtratie tbv chlorofyl en faeofytine		2wg5
Humuszuren		2ng2f
M-getal na filtratie		1ww3pmgetf
M-getal (waterstofcarbonaat)		1ww3pmget
Nitrificatie-remming		www5nitr
Ortho-fosfaat kuvettentest		www5po4
P-getal (carbonaat)		1ww3pmget
pH (lab.meting)		1ww4nc
Quickscan blauwalg zwemwater		3wz3flprob
Respiratie-remming		www5resp
Sulfide in water		4dz3por
TOC in Water		2nb2zs2
Totaal-stikstof in water		2nb2zs2
Organisch		
Conservering 1 liter multi SPE kolom		gnr5or60
Conservering GBM, OCB en PCB in water		gng2gcms
Conservering gewasbeschermingsmiddelen LCMSMS		gng2lcms
Conservering multi SPE		gnr5or60
GBM GCMSMS		gng2gcms
Gewasbeschermingsmiddelen met LCMSMS pakket 1	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	gng2lcms
Gewasbeschermingsmiddelen met LCMSMS pakket 2	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	gng2lcms
Gidsstoffen in water	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	wnr2med
Medicijnen in water	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	wnr2med
Minerale olie identificatie		wnr5or80
Minerale olie in water		wnr5or80
OCB-s in water		gng2gcms
PAK EPA in water		gnr5or

Water (Oppervlaktewater, grondwater, afvalwater)

Test	Opmerking	Verpakking
PAK VROM in water		gnr5or
PCB in water		gnr5or
Petroleum extraheerbare bestanddelen, directe extractie		wnr5zc4
Vluchtige koolwaterstoffen: BTEX/Chloor-pakket	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	wnz2ome432
Vluchtige koolwaterstoffen: BTEXN	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	wnz2ome432
Vluchtige koolwaterstoffen: SIKB-protocol 3130 aanvullend A	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	wnz2ome432
Vluchtige koolwaterstoffen: SIKB-protocol 3130 aanvullend B	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	wnz2ome432
Vluchtige koolwaterstoffen: Uitgebreid pakket	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	wnz2ome432
<i>Uitbesteding</i>		
4-chlooraniline		gnz5ome422
Abamectine uitbesteed		gnz5ome422
Aclonifen		gnz5ome422
Bestrijdingsmiddelen met lage rapportagegrenzen	<i>Let op: 2 verpakkingen</i>	gnz5rws46a
Boor in water		2nw2zn2ub
Borium in water na filtratie		2nz2zn2ub
Brandvertragers (PBDE)		gnz5ome422
Bromaat		2nw2HWL
Carboximiden		gnz5ome429
Chroom (VI)		1ww3
Cyanide totaal		gnz2cn
Cyanide, vrij		gnz2cn
Cyprodinil en Methoxyfenozide uitbesteding		gnz5ome422
DEHP		gnz5ub
Detergenten, anionactief		gnz5ome422
Detergenten, kationactief		gnz5ome422
Detergenten, nonionactief		gnz5ome422
Dicofol		gnz5ome422
Extinctiemeting bij 254 nm		1wz4HWL
Fluoride		2nz2ome470
GCMS pakket bma		gnz5ub
Gewasbeschermingsmiddelen niet toetsbare stoffen		gnz5ub
Hexabroomcyclododecaan		gnz5ub
LC onderzoek glyfosaat		2nz2ome470
LCTQ pakket 2		gnz5ome422
Legionella		2wr4ub
Nonylfenolen		gnz5ub
OCB		gnz2
Omethoaat		gnz5ub
Organotin verbindingen		gnr5ub

Water (Oppervlaktewater, grondwater, afvalwater)

Test	Opmerking	Verpakking
PAK EPA		gnr5
PAK's RWS		gnz5rws46
PCB		gnz2
perfluorooctaansulfonaat en perfluorooctaanzuur		1nw3ub
Petroleum extraheerbare bestanddelen, soxhlet		wnr5zz2ub80
Poly- en perfluoralkylstoffen		1nw3ub
Poly- en perfluoralkylstoffen uitbesteed bij de VU		2ng3
Quinoxifen		gnz5ome422
Seleen		2nw2zn2ub
Som c10-c13 chlooralkanen		gnz5ome422
Specifieke verontreinigende stoffen (GBM)		gnz5ome422
Strontium na filtratie		2nz2zn2ub
Sulfide opgelost		gnz5
Sulfide totaal		wnw3
Tellurium na filtratie		2nz2zn2ub
Titaan na filtratie		2nz2zn2ub
Tributylfosfaat		gnz5ub
Uranium		2nw2zn2ub
Waterdamp vluchtige fenolen		wnz2fen
Zwavel totaal in water		2nw2zn2ub

Vaste matrix (Waterbodem; Sediment)

Test	Opmerking	Verpakking
Analyse automaat		
Ortho-fosfaat tbv Olsen P na extractie		www4nc
Som ammonium- en organisch gebonden stikstof		www4nc
Totaal-fosfor in vaste matrix		www4nc
Berekende test		
IJzer in vaste matrix na destructie		www4gr
Olsen-P gehalte		www4gr
Totaal-fosfor in vaste matrix		www4gr
Zwavel totaal in vaste matrix		www4ub
Gravimetrie		
Carbonaat, volumetrisch		www4gr
Dichtheid (soortelijke massa)		www4gr
Gloeirest van de indamprest		www4gr
Indamprest van vaste matrix		www4gr
Korrelgrootte <1000 µm		www4gr
Korrelgrootte <125 µm		www4gr
Korrelgrootte <16 µm, pipetmethode		www4gr
Korrelgrootte <16 µm, sedigraaf		www4gr
Korrelgrootte <2 µm, pipetmethode		www4gr
Korrelgrootte <2 µm, sedigraaf		www4gr
Korrelgrootte <2000 µm		www4gr
Korrelgrootte <250 µm		www4gr
Korrelgrootte <50 µm		www4gr
Korrelgrootte <500 µm		www4gr
Korrelgrootte <63 µm		www4gr
Korrelgrootte >2000 µm		www4gr
Korrelgrootte voor SCG		www4gr
Organisch stof		www4gr
Zandrest van de indamprest		www4gr
Metalen		
Aluminum in vaste matrix na destructie		www4nc
Antimoon in vaste matrix na destructie		www4nc
Arseen in vaste matrix na destructie		www4nc
Barium in vaste matrix na destructie		www4nc
Berillium in vaste matrix na destructie		www4nc
Cadmium in vaste matrix na destructie		www4nc
Chroom in vaste matrix na destructie		www4nc
Chroom in vaste matrix na destructie		www4nc
Cobalt in vaste matrix na destructie		www4nc
Cobalt in vaste matrix na destructie		www4nc


Vaste matrix (Waterbodem; Sediment)

Test	Opmerking	Verpakking
Fosfor in vaste matrix na destructie		www4nc
IJzer gehalte voor vrij ijzer mbv ICP-MS		www4nc
IJzer in vaste matrix na destructie		www4nc
Koper in vaste matrix na destructie		www4nc
Kwik in vaste matrix na destructie		www4nc
lithium in uitgegist slib		www4nc
Lood in vaste matrix na destructie		www4nc
Molybdeen in vaste matrix na destructie		www4nc
Nikkel in vaste matrix na destructie		www4nc
Tin in vaste matrix na destructie		www4nc
Vanadium in vaste matrix na destructie		www4nc
Vrij ijzer m.b.v. ICP-MS		www4nc
Zink in vaste matrix na destructie		www4nc
Zwavel in vaste matrix na destructie		www4nc
Natchemisch		
Alkaliteit		www4nc80
bacterieluminicentieremmingstest in slib		www4bl
Chemisch zuurstofverbruik in vaste matrix		www4nc
pH in zuiveringsslib (lab meting)		www4nc
Vluchtige vetzuren		www4nc80
Organisch		
Meting OCB's in vaste matrix		www4nc
Meting Pentachloorfenol in vaste matrix		www4nc
Minerale olie identificatie		www4nc
Minerale olie in vaste matrix		www4nc
PAK EPA in vaste matrix		www4nc
PAK VROM in vaste matrix		www4nc
PCB-s in vaste matrix		www4nc
Uitbesteding		
Asbest: NEN 5898		5wr8asb
Asbest: Vast materiaal (NEN 5896)		5wr8asb
Calcium in vaste matrix		www4ub
Chloride in vaste matrix		www4ub
Magnesium in vaste matrix		www4ub
Poly- en perfluoralkylstoffen		1wp4ub
Totaal cyanide in vaste matrix		www4cn
Vluchtige aromaten in vaste matrix		www4ub
Vrij cyanide in vaste matrix		www4cn
Zwavel totaal in vaste matrix		www4ub

Veld (Veldmeting, Ecologische veldmeting)

Test	Opmerking	Verpakking
Berekende test		
Test t.b.v. het nemen van de juiste verpakking tijdens de bemonstering		gnr5or60
Monstername		
Bemonstering diatomeeën		wwp3dia
Bemonstering fytoplankton diepe wateren		www5fyto
Bemonstering fytoplankton diepe wateren, mengmonster		www3fyto
Bemonstering fytoplankton ondiepe wateren		www5fyto
Bemonstering fytoplankton ondiepe wateren, mengmonster		www3fyto
Bemonstering fytoplankton sloten en kanalen		www3fyto
Bemonstering fytoplankton vanaf waterkant		www5fyto
Bemonstering fytoplankton vanaf waterkant TEO		gnz2cn
Bemonstering zooplankton diepe wateren		wwp3zoo
Bemonstering zooplankton ondiepe wateren		wwp3zoo
Bemonstering zooplankton vanaf waterkant		wwp3zoo
Bemonstering zooplankton vanaf waterkant TEO		gnz3zoo

1ww3

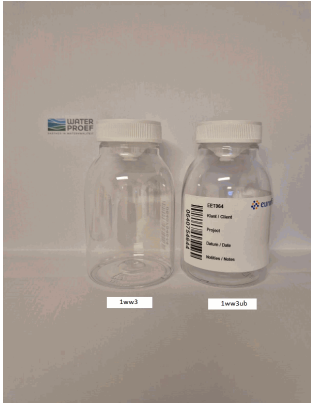

PET potje
wijdhals witte
dop 250 ml

Verpakking

1ww3pmgetf

PET potje wijdhals witte dop 250 ml [Filtratie voor P- en M-getal]

Label FIL MGET

Vulinstructie Filtreren

1ww3pmget

PET potje wijdhals witte dop 250 ml [P- en M-getal]

Label PMGET

Vulinstructie Lucht vrij afvullen


1ww3ub

PET potje wijdhals witte dop 250 ml [Uitbesteding/EET064]

Label UITB

Vulinstructie -

1ww4

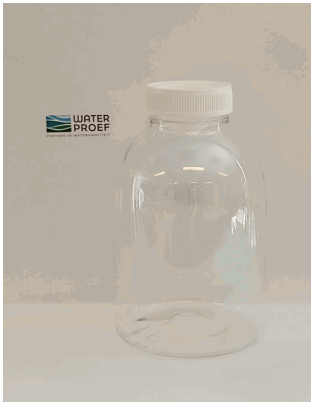

PET potje
wijdhals witte
dop 500 ml

Verpakking

1ww4nc

PET potje wijdhals witte dop 500 ml [Nat chemisch]

Label PH

Vulinstructie Lucht vrij afvullen

1ww4bzb

PET potje wijdhals witte dop 500 ml [BZV]

Label BZV

Vulinstructie Lucht vrij afvullen

2nb2



HD-PE flesje
nauwhals blauwe
dop 100 ml

Verpakking

2nb2zs2

HD-PE flesje nauwhals blauwe dop 100 ml [Aanzuren H₂SO₄ tot pH < 2]

Label H₂SO₄

Vulinstructie -

2nb2zs2f

HD-PE flesje nauwhals blauwe dop 100 ml [Aanzuren H₂SO₄ tot pH < 2 Filtratie]

Label FIL H₂SO₄

Vulinstructie Filtreren

2nb2zs2toc

HD-PE flesje nauwhals blauwe dop 100 ml [Aanzuren H₂SO₄ tot pH < 2 voor TOCTN]

Label TOCTN

Vulinstructie -

2ng2



HD-PE flesje
nauwhals gele
dop 100 ml

Verpakking

2ng2doc

HD-PE flesje nauwhals gele dop 100 ml [DOC]

Label FIL DOC

Vulinstructie Filtreren, volledig vullen

2ng2f

HD-PE flesje nauwhals gele dop 100 ml [Filtratie in het veld]

Label FIL

Vulinstructie Max 80% vullen - Filtreren

2ng2brf

HD-PE flesje nauwhals gele dop 100 ml [Bromide]

Label FIL BR

Vulinstructie Filtreren volledig uitvullen

2ng3



HD-PE flesje
nauwhals gele
dop 250 ml

Verpakking


2ng3ub

HD-PE flesje nauwhals gele dop 250 ml [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie -

2nm2

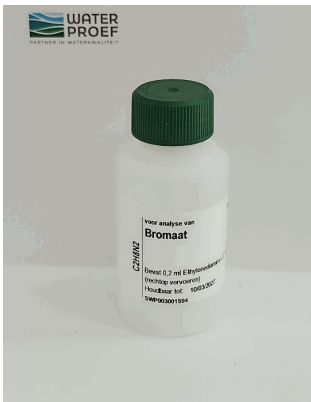

HD-PE flesje
nauwhals groene
dop 100 ml

Verpakking


2nm2brof

HD-PE flesje nauwhals groene dop 100 ml [Bromaat]

Label FIL BRO

Vulinstructie Filteren

2nr2

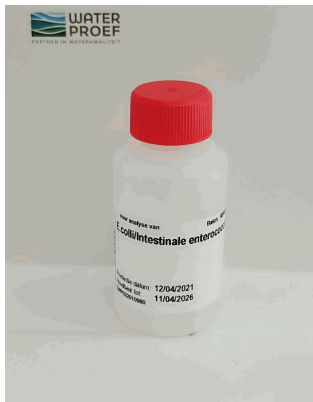

HD-PE flesje
nauwhals rode
dop 100 ml

Verpakking

2nr2bact

HD-PE flesje nauwhals rode dop 100 ml [Microbiologie]

Label BACT

Vulinstructie 90% vullen

2nr3



HD-PE flesje
nauwhals rode
dop 250 ml

Verpakking

2nr3med50

HD-PE flesje nauwhals rode dop 250ml [med 50%]

Label VRIEZER

Vulinstructie 50% vullen

2nw2



HD-PE flesje
nauwhals witte
dop 100 ml

Verpakking

2nw2zn2

HD-PE flesje nauwhals witte dop 100 ml [Aanzuren HNO₃ tot pH<2]

Label MET

Vulinstructie -

2nw2zn2ub

HD-PE flesje nauwhals witte dop 100 ml [Aanzuren HNO₃ tot pH < 2 Uitbested]

Label UITB

Vulinstructie -

2nw2HWL

HWL, HD-PE flesje nauwhals witte dop 100 ml [uitbested]

Label UITB

Vulinstructie -

2nz2



HD-PE flesje
nauwhals zwarte
dop 100 ml

Verpakking

2nz2ome470

HD-PE flesje nauwhals zwarte dop 100 ml [Omegam verpakking 470]

Label UITB

Vulinstructie -

2nz2zn2

HD-PE flesje nauwhals zwarte dop 100 ml [Aanzuren HNO₃ tot pH<2]

Label FIL MET

Vulinstructie Filtreren

2nz2zn2ub

HD-PE flesje nauwhals zwarte dop 100 ml [Aanzuren HNO₃ tot pH < 2 Uitbesteed]

Label FIL/UITB

Vulinstructie Filtreren

2nz3



HD-PE flesje
nauwhals zwarte
dop 250 ml

Verpakking

2nz3bzb

HD-PE flesje nauwhals zwarte dop 250 ml [BZV]

Label BZV

Vulinstructie -

2nz3po4

HD-PE flesje nauwhals zwarte dop 250 ml [Ortho-fosfaat]

Label ORTHO-P

Vulinstructie -

2nz3nc

HD-PE flesje nauwhals zwarte dop 250 ml [Nat chemisch]

Label

Vulinstructie -

2nz3ome408

HD-PE zwart 250 ml nauwhals zwarte dop [Uitbesteed/Omegam408]

Label UITB

Vulinstructie Volledig vullen

2wb4



HD-PE potje
wijdhals blauwe
dop 500 ml

Verpakking

2wb4ub

RIVM, HD-PE potje wijdhals blauwe dop 500 ml [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie Volledig Vullen

2wg5



HD-PE Wijdhals
groene dop 1 liter

Verpakking

2wg5chl

HD-PE Wijdhals groene dop 1 liter [Chlorofyl]

Label CHFYL

Vulinstructie -

2wg5tox

HD-PE Wijdhals groene dop 1 liter [tox]

Label VRIEZER

Vulinstructie 70% vullen

2wr4



HD-PE potje
wijdhals rode dop
500 ml

Verpakking

2wr4ub

HD-PE potje wijdhals rode dop 500 ml [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie Volledig vullen

3wz3



PVC potje
wijdhals zwarte
dop 250 ml

Verpakking

3wz3flprob

PVC potje wijdhals zwarte dop 250 ml [Fluoroprobe]

Label FLPROB

Vulinstructie 90% vullen

3wz3flprobz

PVC potje wijdhals zwarte dop 250 ml [Fluoroprobe/zwem]

Label FLPBZWEM

Vulinstructie 90% vullen

4dz3



PE-LD
doorzichtige zak
250 ml

Verpakking

4dz3por

PE-LD doorzichtige zak 250 ml [Porievocht]

Label

Vulinstructie -

4vw4



PE-LD vierkant
witte dop 500 ml

Verpakking

Label

Vulinstructie -

5wr8



PP emmer rood
deksel 10 liter

Verpakking

5wr8asb

PP emmer rood deksel 10 liter [Asbest]

Label ASB

Vulinstructie -

5ww8



PP emmer wit
deksel 10 liter

Verpakking

Label

Vulinstructie -

gng2



bruin glas flesje
nauwhals groene
dop 100 ml

Verpakking

gng2gcms

bruin glas flesje nauwhals groene dop 100 ml

Label GCMS

Vulinstructie Vullen met 50ml monster

gng2lcms

bruin glas flesje nauwhals groene dop 100 ml

Label LCMS

Vulinstructie Vullen met 50ml monster

gnr4



Groen glas flesje
nauwhals rode
dop 500 ml

Verpakking

Label
Vulinstructie -

gnr5



gnr5

gnr5ome424

Groen glas fles
nauwhals rode
dop 1 liter

Verpakking

gnr5ub

Groen glas fles nauwhals rode dop 1 liter [Uitbesteed]

Label UITB
Vulinstructie Lucht vrij afvullen

gnr5or

Groen glas fles nauwhals rode dop 1 liter [Organisch]

Label PAK
Vulinstructie Lucht vrij afvullen

gnr5or60

Groen glas fles nauwhals rode dop 1 liter [Organisch]

Label VRIEZER
Vulinstructie 60% vullen

gnr5ome424

EET510, Groen Nauwhalsfles met Rode Dop 1L met H₂SO₄

Label UITB
Vulinstructie -

gnz2



Bruin glazen fles,
zwarte dop, 100
ml

Verpakking

gnz2cn

EET081, Bruin glazen fles, zwarte dop, 100 ml [Cyanide]

Label CN

Vulinstructie Lucht vrij afvullen

gnz2fyto

Bruin glazen fles, zwarte dop, 100 ml [FYTO TEO]

Label FYTO TEO

Vulinstructie -

gnz2ome443

EET570, Bruin glazen fles, zwarte dop, 100 ml

Label UITB

Vulinstructie Volledig vullen

gnz5



Groen glas fles
nauwhals zwarte
dop 1 liter

Verpakking

gnz5ome422

EET505, Groen glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie Volledig vullen

gnz5ub

EET505, Groen glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie Volledig vullen

gnz5rws46

RWS, Groen glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter

Label UITB

Vulinstructie 50% vullen

gnz5rws46a

RWS, Groen glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter

Label UITB

Vulinstructie Volledig vullen

gnz5ome429

EET550, Groen glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter azijnzuur [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie Volledig vullen

gnz5ome422s

EET505, Groen glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter [uitbesteed Sulfide]

Label UITB-OS

Vulinstructie Volledig Vullen

wnr2



blank glas flesje
nauwhals rode
dop 100 ml

Verpakking

wnr2med

blank glas flesje nauwhals rode dop 100 ml [Medicijnresten]

Label LCMS

Vulinstructie Volledig Vullen

wnr5



Blank glas fles
nauwhals rode
dop 1 liter

Verpakking

wnr5or80

Blank glas fles nauwhals rode dop 1 liter [Organisch 80% vullen]

Label MINOL

Vulinstructie 80% vullen

wnr5zc4

Blank glas fles nauwhals rode dop 1 liter [Aanzuren HCl tot pH<4]

Label PEB

Vulinstructie 80% vullen

wnr5zz2ub80

Al-West, Blank glas fles nauwhals rode dop 1 liter [Aanzuren HCL tot pH < 2 Uitb

Label UITB

Vulinstructie 80% vullen

wnw2




Blank glas flesje
nauwhals witte
dop 100 ml

Verpakking

Label

Vulinstructie -

wnw3

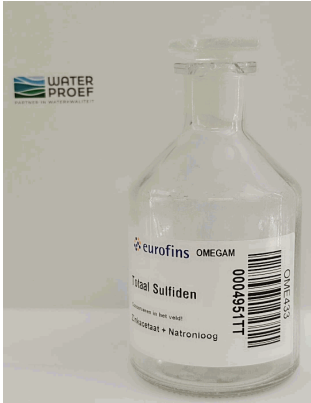

Blank glas flesje
nauwhals witte
dop 250 ml


Verpakking

wnw3ubs

EET555, Blank glas flesje nauwhals witte dop 250 ml [Uitbesteed]

Label UITB-TS
Vulinstructie Luchtvrij afvullen

wnz2

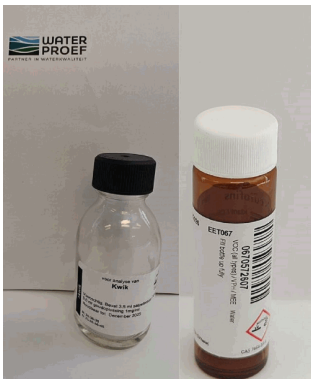

Blank glas flesje
nauwhals zwarte
dop 100 ml

Verpakking

wnz2fen

ANL067, Bruin glas flesje nauwhals witte dop 40 ml + zwavelzuur

Label FENOL
Vulinstructie Luchtvrij afvullen

wnz2hg

Blank glas flesje nauwhals zwarte dop 100 ml [Kwik]

Label HG
Vulinstructie -

wnz2hgf

Blank glas flesje nauwhals zwarte dop 100 ml [Filtratie voor Kwik]

Label HG-FIL
Vulinstructie Filtreren

wnz2ome432

Blank glas flesje nauwhals zwarte dop 250 ml

Label UITB
Vulinstructie Luchtvrij uitvullen

wnz2hg

wnz2fen

wwp3



Blank glas potje
wijdhals witte
dop 250 ml

Verpakking

wwp3dia

Blank glas potje wijdhals witte dop 250 ml [Diatomeeen]

Label DIA

Vulinstructie -

wwp3zoo

Blank glas potje wijdhals witte dop 250 ml [zooplankton]

Label ZOO

Vulinstructie Lugol toevoegen

www3



Blank glas potje
wijdhals witte
dop 140 ml

Verpakking


www3fyto

Blank glas potje wijdhals witte dop 140 ml [fytoplankton]

Label FYTO

Vulinstructie Lugol toevoegen

www4

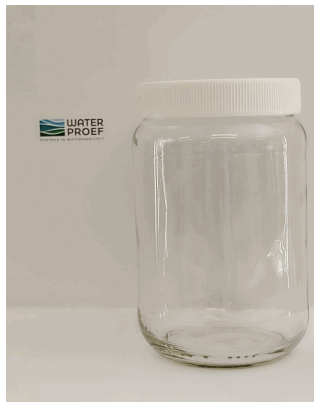

Blank glazen pot
wijdhals witte
dop 550 ml

Verpakking

www4gr

Blank glazen pot wijdhals witte dop 550 ml [Gravimetrie]

Label GRAV

Vulinstructie 75% vullen

www4ub

Blank glazen pot wijdhals witte dop 550 ml [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie -

www4nc

Blank glazen pot wijdhals witte dop 550 ml [Nat chemisch]

Label NC

Vulinstructie -

www4cn

Blank glazen pot wijdhals witte dop 550 ml [Cyanide]

Label UITB

Vulinstructie -

www4nc80

Blank glazen pot wijdhals witte dop 550 ml [Nat chemisch 80% vullen]

Label NC

Vulinstructie 80% vullen

www4bl

Blank glazen pot wijdhals witte dop 550 ml [Bact luminiscentie-R]

Label BLRT

Vulinstructie -

www5

Blank glas
wijdhals (sapfles)
witte dop 1 liter

Verpakking**www5gr**

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [Gravimetrie]

Label GRAV

Vulinstructie -

www5bez

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [bezinking]

Label BEZ

Vulinstructie -

www5nitr

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [Nitrificatieremming]

Label NITR

Vulinstructie -

www5resp

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [Respiratieremming]

Label RESP

Vulinstructie -

www5fyto

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [Fytoplankton]

Label FYTO

Vulinstructie Lugol toevoegen

www5po4

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [Ortho-fosfaat]

Label P-AFG

Vulinstructie Lucht vrij afvullen

www5bzbv19

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [BZV na 19 dagen]

Label BZV19

Vulinstructie Lucht vrij afvullen

www5nc

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [Nat chemisch]

Label NC

Vulinstructie -

www5org

Blank glas wijdhals (sapfles) witte dop 1 liter [Organisch]

Label ORG

Vulinstructie -

1nw3



**PET flesje
nauwhals witte
dop 125 ml
[Omegam444]**

Verpakking

1nw3ub

EET515, PET flesje nauwhals witte dop 125 ml [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie -

1wp4



**PET potje
wijdhals witte
dop 400 ml
[Omegam402]**

Verpakking

1wp4ub

EET610, PET potje wijdhals witte dop 400 ml [Uitbesteed]

Label UITB

Vulinstructie -

2wm4



**HD-PE potje
wijdhals groene
dop 500 ml
[Omegam464]**

Verpakking

Label

Vulinstructie -