



Dit document bevat alle verpakkingen in gebruik bij Waterproef.

Hier volgt een uitleg hoe de emballagelijst werkt.

Het eerste gedeelte bestaat uit een overzicht van de analyses.

Dit overzicht is uitgesplitst in twee categorieën:

analyses in water compartimenten en analyses in vaste compartimenten.

Zoek in de betreffende categorie de analyse op.

Achter de analyse staat de vulinstructie en de benodigde verpakkingscode(s).

Het tweede gedeelte is een overzicht van verpakkingscodes met foto en beschrijving.

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
ABMTNE1U	Abamectine	Volledig vullen	WPE042
ACRYLAT1	Acrylaten	Volledig vullen	WPE041
ATAE1	Algextox in aangeleverd extract		
ATMS1	Algextox in ACM		
AL1	Aluminium		WPE022
AL1F	Aluminium na filtratie	Filtreren	WPE024
AMINES1	Amines	Volledig vullen	WPE042
NH31	Ammoniak (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NH32	Ammoniak (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NH41	Ammonium (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NH42	Ammonium (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
PO4K	Anaerobe fosfaatafgifte	Lucht vrij afvullen	WPE006
APRMSIU	Anti PR-CALUX		
AARMSIU	Anti-AR CALUX		
SB1	Antimoon		WPE022
SB1F	Antimoon na filtratie	Filtreren	WPE024
AS1	Arseen		WPE022
AS4	Arseen na destructie		WPE022
AS1F	Arseen na filtratie	Filtreren	WPE024
BA1	Barium		WPE022
BA1F	Barium na filtratie	Filtreren	WPE024
BMFYTD2	Bemonstering fytoplankton diepe wateren	5 ml lugol toevoegen	WPE006
BMFYTO2	Bemonstering fytoplankton ondiepe wateren	5 ml lugol toevoegen	WPE006
BMFYTTEO2	Bemonstering fytoplankton TEO		WPE011
BMFYTK2	Bemonstering fytoplankton waterkant	5 ml lugol toevoegen	WPE006
BMZOOD2	Bemonstering zooplankton diepe wateren	1,25 ml lugol toevoegen	WPE008
BMZOOK2	Bemonstering zooplankton vanaf waterkant	1,25 ml lugol toevoegen	WPE008
FLPROBZQSCN2	Bepaling van algengroepen mbv fluoroprobe zwemwater incl quickscan	90% vullen	WPE038

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
FLPROB2	Bepaling van algensamenstelling mbv fluoroprobe	90% vullen	WPE038
BTN4	Berekend totaal stikstof (KJN-Hoog, filtratie lab)	Nog filtreren	WPE017 WPE018
		Nog filtreren	WPE032
BTN42	Berekend totaal stikstof (KJN-Hoog, filtratie veld)	Nog filtreren	WPE017 WPE018
		Nog filtreren	WPE032
BTN1	Berekend totaal stikstof (KJN-Laag, filtratie lab)	Nog filtreren	WPE017 WPE018
		Nog filtreren	WPE032
BTN2	Berekend totaal stikstof (KJN-Laag, filtratie veld)	Nog filtreren	WPE017 WPE018
		Nog filtreren	WPE032
BTN1F	Berekend totaal stikstof na filtratie	Filtreren	WPE017
		Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
BTN2F	Berekend totaal stikstof na filtratie (filtratie veld)	Filtreren	WPE017
		Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
BE1	Beryllium		WPE022
BE1F	Beryllium na filtratie	Filtreren	WPE024
BIU	Boor		WPE022
BIUF	Boor na filtratie	Filtreren	WPE024
PBDEIU	Brandvertragers (PBDE)	Volledig vullen	WPE042
BRO1	Bromaat na filtratie	Filtreren	WPE019
BR1	Bromide na filtratie	Filtreren, volledig vullen	WPE018
BZV1	BZV	Volledig vullen	WPE025
		Volledig vullen	WPE034
BZVIS19	BZV over 19 dagen	Volledig vullen	3 X WPE006
CD1	Cadmium		WPE022
CD4	Cadmium na destructie		WPE022
CD1F	Cadmium na filtratie	Filtreren	WPE024
CA1	Calcium		WPE022
CA4	Calcium na destructie		WPE022

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
CA1F	Calcium na filtratie	Filtreren	WPE024
CARBOX1U	Carboxamides	Volledig vullen	WPE037
CL1	Chloride (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
CL2	Chloride (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
CHFYL2	Chlorofyl-a en faeofytine		WPE026
CR1	Chroom		WPE022
CR64U	Chroom (VI)	Filtreren, volledig vullen	WPE035
CR4	Chroom na destructie		WPE022
CR1F	Chroom na filtratie	Filtreren	WPE024
COVID1	Covid bemonstering	Volledig vullen	WPE027
TCN1U	Cyanide, totaal	Luchtvrij afvullen	WPE007
VCN1U	Cyanide, vrij	Luchtvrij afvullen	WPE007
CTOXMS1U	Cytotox CALUX test		
CZV1	CZV		WPE017
CZV1F	CZV na filtratie	Filtreren	WPE017
CZV1TF16	CZV na filtratie over 1,6 µm	Filtreren	WPE034
DTAE1	Daphniatox in aangeleverd extract		
DTMS1	Daphniatox in DSW		
DEHP1U	DEHP	Volledig vullen	WPE042
DETANI1U	Detergenten, anionactief	Luchtvrij afvullen	WPE042
DETKAT1U	Detergenten, kationactief	Luchtvrij afvullen	WPE042
DETNONI1U	Detergenten, nonionactief	Luchtvrij afvullen	WPE042
DCFL1U	Dicofol		WPE042
ECOL1	E-coli	90% vullen	WPE021
EGV251	EGV bij 25 graden Celsius (labmeting)	Luchtvrij afvullen	WPE032
EOX1U	EOX		WPE030
ERAMS1U	ERa CALUX		
UV2541	Extinctiemeting bij 254 nm	Max 80% vullen - filtreren	WPE018
FL1U	Fluoride		WPE023
FORMAL1	Formaldehyde	Volledig vullen	WPE004

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
PSFE1	Fosfor, zwavel en ijzer		WPE029
FTALAT1	Ftalaten	Volledig vullen	WPE042
GBM11	GBM pakket 1	Vullen met 50ml monster	2 X WPE010
GBM21	GBM pakket 2	Vullen met 50ml monster	2 X WPE010
GBM31	GBM pakket 3	Vullen met 50ml monster	2 X WPE010
GBM41	GBM pakket 4	Vullen met 50ml monster	2 X WPE010
GBMBMA1U	GBM pakket BMA	Volledig vullen	WPE042
GBMNTS1U	GBM pakket niet toetsbare stoffen	Volledig vullen	4 X WPE042
GBMSVS4U	GBM pakket specifieke verontreinigde stoffen	Volledig vullen	3 X WPE042
MEDB1	Gidsstoffen	Volledig vullen	2 X WPE003
GROB1	Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen	Volledig vullen	WPE006
GROB2	Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen, lage bepalingsgrens	Volledig vullen	2 X WPE006
GRMS1U	GR CALUX		
HH1	Hardheid	Filtreren	WPE024
HBCD1U	Hexabroomcyclododecaan	Volledig vullen	WPE042
HUMUS2	Humuszuren	Max 80% vullen - filtreren	WPE018
FE1	IJzer		WPE022
FE4	IJzer na destructie		WPE022
FE1F	IJzer na filtratie	Filtreren	WPE024
INSECT1	Insecticiden	Volledig vullen	2 X WPE042
INTENT1	Intestinale enterococchen	90% vullen	WPE021
K1	Kalium		WPE022
K4	Kalium na destructie		WPE022
K1F	Kalium na filtratie	Filtreren	WPE024
KETON1	Ketonen/Aceton	Volledig vullen	WPE004
CO1	Kobalt		WPE022
CO1F	Kobalt na filtratie	Filtreren	WPE024

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
CU1	Koper		WPE022
CU4	Koper na destructie		WPE022
CU1F	Koper na filtratie	Filtreren	WPE024
HG1	Kwik		WPE005
HG4	Kwik na destructie		WPE022
HG1F	Kwik na filtratie	Filtreren	WPE005
LCTQP21U	LCTQ Pakket 2		WPE042
LEGIO1U	Legionella		WPE028
PB1	Lood		WPE022
PB4	Lood na destructie		WPE022
PB1F	Lood na filtratie	Filtreren	WPE024
MG1	Magnesium		WPE022
MG4	Magnesium na destructie		WPE022
MG1F	Magnesium na filtratie	Filtreren	WPE024
MN1	Mangaan		WPE022
MN1F	Mangaan na filtratie	Filtreren	WPE024
VPORG1	Matrixmonster voor Organisch	Volledig vullen	4 X WPE013
MED1	Medicijnen	Volledig vullen	2 X WPE003
MTAE1	Microtox in aangeleverd extract		
MTMS1	Microtox in DSW		
VPMTB1	Milieutoxicologie 12 x 1 liter monstername	60% vullen	12 X WPE013
VPMTA1	Milieutoxicologie 2 x 1 liter monstername	60% vullen	2 X WPE013
MINOL1	Minerale olie	80% vullen	WPE002
MINOL1I	Minerale olie identificatie		
MO1	Molybdeen		WPE022
MO1F	Molybdeen na filtratie	Filtreren	WPE024
NA1	Natrium		WPE022
NA4	Natrium na destructie		WPE022
NA1F	Natrium na filtratie	Filtreren	WPE024
NI1	Nikkel		WPE022
NI4	Nikkel na destructie		WPE022
NI1F	Nikkel na filtratie	Filtreren	WPE024

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
NO31	Nitraat (berekend, filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE018
		Max 80% vullen -	WPE018
		filtreren	
		Filtratie op Lab	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
		Nog filtreren	WPE032
		Max 80% vullen -	WPE032
		filtreren	
		Filtratie op Lab	WPE032
NO32	Nitraat (berekend, filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Max 80% vullen -	WPE018
		filtreren	
		Nog filtreren	WPE032
		Max 80% vullen -	WPE032
		filtreren	
NO21	Nitriet (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NO22	Nitriet (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NITRI1	Nitrificatieremming		WPE006
NF1U	Nonylfenolen	Volledig vullen	WPE042
NRF2MS1U	Nrf2 CALUX		
OCB1	OCB	Vullen met 50ml	2 X WPE010
		monster	
		Volledig vullen	WPE012
OB1	Onopgeloste bestanddelen	Volledig vullen	WPE006
OB2	Onopgeloste bestanddelen, lage bepalingsgrens	Volledig vullen	2 X WPE006
DOC1	Opgelost organisch koolstof	Filtreren, luchtvrij vullen	WPE018
OPLOSP11	Oplosmiddelen pakket 1	Volledig vullen	WPE004
ORGTIN2	Organotin	Luchtvrij afvullen	WPE014
PO41	Ortho-fosfaat (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
PO42	Ortho-fosfaat (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
PO41X	Ortho-fosfaat zonder filtratie		WPE025
P53SMS1U	P53 CALUX (+S9)		
P53MS1U	P53 CALUX (-S9)		
PAHMS1U	PAH CALUX		
PAK164U	PAK 16		WPE030
PAK1	PAK 16 componenten	Luchtvrij afvullen	WPE013
PAKRWS1U	PAK's RWS	50% vullen	WPE043
PCB4U	PCB	Volledig vullen	WPE012
PFOX1U	Perfluorooctaansulfonaat en perfluorooctaanzuur		WPE031
PEB1	Petroleum extraheerbare bestanddelen, directe extractie	80% vullen	WPE001
PEBSOX1U	Petroleum extraheerbare bestanddelen, Soxhlet	80% vullen	WPE001
PH1	pH (labmeting)	Luchtvrij afvullen	WPE032
PFA1U	Poly- en perfluoralkylstoffen		WPE031
ACRYLAM1	Polyacrylamide	Volledig vullen	WPE013
PPARGMS1U	PPARg CALUX		
PXRMS1U	PXR CALUX		
QSCN2	Quickscan blauwalg zwemwater	90% vullen	WPE038
RESPI4	Respiratieremming		WPE006
XRAYCLIU	Röntgencontrastmiddelen	Volledig vullen	WPE042
SEIU	Seleen		WPE022
SE1F	Seleen na filtratie	Filtreren	WPE024
KJN1	Som ammonium en organisch gebonden stikstof		WPE017
KJN1F	Som ammonium en organisch gebonden stikstof na filtratie	Filtreren	WPE017
CHLAKN1U	Som C10-C13 chlooralkanen	Volledig vullen	WPE042
NOX1	Som Nitriet + Nitraat (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
NOX2	Som Nitriet + Nitraat (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032

Analyse overzicht
Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
VOXIU	Som vluchtige organische halogeenverbindingen	Luchtvrij afvullen	WPE041
SVBCLIU	Som vrij beschikbaar chloor	Volledig vullen	WPE044
SRIUF	Strontium na filtratie	Filtreren	WPE024
SO41	Sulfaat (filtratie lab)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
SO42	Sulfaat (filtratie veld)	Nog filtreren	WPE018
		Nog filtreren	WPE032
OSI	Sulfide, opgelost		WPE029
		Luchtvrij afvullen	WPE042
TSIU	Sulfide, totaal	Luchtvrij afvullen	WPE040
TEIUF	Tellurium na filtratie	Filtreren	WPE024
TLIF	Thallium na filtratie	Filtreren	WPE024
SNIF	Tin na filtratie	Filtreren	WPE024
TIUUF	Titaan na filtratie	Filtreren	WPE024
TP1	Totaal fosfor		WPE017
TP1F	Totaal fosfor na filtratie	Filtreren	WPE017
TOC1	Totaal organisch koolstof		2 X WPE017
TN1	Totaal stikstof		2 X WPE017
TROEBIU	Troebelheid	Luchtvrij afvullen	WPE016
UIU	Uranium		WPE022
UIF	Uranium na filtratie	Filtreren	WPE024
V1	Vanadium		WPE022
V1F	Vanadium na filtratie	Filtreren	WPE024
VPRBB1	Verpakking robuuste bemonstering (Medicijnresten)	60% vullen	WPE025
VPRBA1	Verpakking robuuste bemonstering (MSPE)	60% vullen	WPE026
BTEXIU	Vluchtige aromaten: BTEXN	Luchtvrij afvullen	WPE041
VKWA1U	Vluchtige koolwaterstoffen: SIKB-protocol 3130 aanvullend A	Luchtvrij afvullen	WPE041
VKWU1U	Vluchtige koolwaterstoffen: uitgebreid pakket	Luchtvrij afvullen	WPE041
VLFENIU	Waterdamp vluchtige fenolen	Luchtvrij afvullen	WPE039
HCO32	Waterstofcarbonaat	Luchtvrij afvullen	WPE032

Analyse overzicht

Water compartimenten (oppervlakte-, grond-, porie-, afval- en lozingswater)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
HCO32F	Waterstofcarbonaat na filtratie	Filtreren, luchtvrij vullen	WPE032
AG1F	Zilver na filtratie	Filtreren	WPE024
ZN1	Zink		WPE022
ZN4	Zink na destructie		WPE022
ZN1F	Zink na filtratie	Filtreren	WPE024
TZWAVIU	Zwavel, totaal		WPE022

Analyse overzicht
Vaste compartimenten (bodem, sediment, slib en zuiveringslib)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
ALK6	Alkaliteit	80% vullen	WPE009
ASBEST5	Asbest		3 X WPE036
BEZM1	Bezinking met maatcilinder		WPE006
BEZ1	Bezinksel		WPE006
CA5U	Calcium		WPE009
KG_CO35	Calciumcarbonaat	80% vullen	WPE009
CENTR0	Centrifugeren	80% vullen	WPE009
CL5U	Chloride		WPE009
CZV5	CZV	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
DCHTH5	Dichtheid (soortelijke massa)	80% vullen	WPE009
EOX5U	EOX		WPE009
PS5	Fosfor en zwavel in vaste matrix	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
GRIR5	Gloeirest van de indamprest	80% vullen	WPE009
GROB4	Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen		WPE006
GRAN5U	Granulaat uitgebreid onderzoek	90% vullen	1000 X WPE999
FE5	IJzer	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
IR5	Indamprest van vaste matrix	80% vullen	WPE009
KG_KG2000G5	Korrelgrootte >2000 µm	80% vullen	WPE009
SCG5U	Korrelgrootte uitgebreid SCG	80% vullen	WPE009
KG_KGP2	Korrelgroottefractie <2 µm, pipetmethode	80% vullen	WPE009
HG5	Kwik	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
MGSU	Magnesium		WPE009
MT5	Microtox in poriewater	80% vullen	WPE009
MINOL5	Minerale olie	80% vullen	WPE009
MINOL5I	Minerale olie identificatie		
OCB5	OCB	80% vullen	WPE009
OB4	Onopgeloste bestanddelen in actief slib		WPE006

Analyse overzicht
Vaste compartimenten (bodem, sediment, slib en zuiveringslib)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
KG_OS5	Organisch stof	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
PO45	Ortho-fosfaat na centrifugeren	80% vullen	WPE009
POL55	P Olsen	80% vullen	WPE009
PAK105	PAK 10 componenten	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
PAK165	PAK 16 componenten	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
PCB5	PCB	80% vullen	WPE009
PCF5	Pentachloorfenol	80% vullen	WPE009
PH6	pH in zuiveringsslib (labmeting)	80% vullen	WPE009
PFAS5U	Poly- en perfluoralkylstoffen		WPE033
KJN5	Som ammonium en organisch gebonden	80% vullen	WPE009
	stikstof	80% vullen	WPE009
TP5	Totaal fosfor	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
BTEX5U	Vluchtige aromaten		WPE009
VKW5	Vluchtige koolwaterstoffen	80% vullen	WPE009
VVZ6	Vluchtige vetzuren	80% vullen	WPE009
VFE5M	Vrij ijzer mbv ICP-MS		WPE008
SB5M	WB: Antimoon na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
AS5M	WB: Arseen na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
BA5M	WB: Barium na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
CD5M	WB: Cadmium na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
CR5M	WB: Chroom na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
FE5M	WB: IJzer na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009

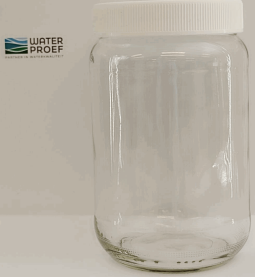
Analyse overzicht
Vaste compartimenten (bodem, sediment, slib en zuiveringslib)

Testcode	Omschrijving	Vulinstructie	Verpakking
CO5M	WB: Kobalt na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
CU5M	WB: Koper na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
PB5M	WB: Lood na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
MO5M	WB: Molybdeen na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
NI5M	WB: Nikkel na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
SN5M	WB: Tin na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
V5M	WB: Vanadium na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
ZN5M	WB: Zink na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
ZANDIR5	Zandrest van de indamprest	80% vullen	WPE009
AS5I	ZS-SB: Arseen na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
BE5I	ZS-SB: Beryllium na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
CD5I	ZS-SB: Cadmium na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
CR5I	ZS-SB: Chroom na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
FE5I	ZS-SB: IJzer na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
CU5I	ZS-SB: Koper na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
PB5I	ZS-SB: Lood na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
NI5I	ZS-SB: Nikkel na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
ZN5I	ZS-SB: Zink na destructie	80% vullen	WPE009
		80% vullen	WPE009
TZWAV5U	Zwavel, totaal		WPE009

Emballage overzicht

 	WPE001 Blank glas fles nauwhals rode dop 1 liter (Zoutzuur)	 	WPE002 Blank glas fles nauwhals rode dop 1 liter
 	WPE003 Blank glas fles nauwhals rode dop 100 ml	 	WPE004 Blank glas fles nauwhals witte dop 250 ml (OME431, EET063)
 	WPE005 Blank glas fles nauwhals zwarte dop 100 ml, HNO ₃ /Au	 	WPE006 Blank glas fles wijdhals witte dop 1 liter
 	WPE007 Gekleurd glas fles nauwhals blauwe dop 50 ml, NaOH (OME442,EET081)	 	WPE008 Blank glas fles wijdhals witte dop 375 ml

Emballage overzicht

	WPE009 Blank glas pot wijdhals witte dop 720 ml		WPE010 Gekleurd glas fles nauwhals groene dop 100 ml
	WPE011 Gekleurd glas fles zwarte dop 100 ml		WPE012 Gekleurd glas nauwhals witte dop 100 ml (OME443, EET570)
	WPE013 Gekleurd glas fles nauwhals rode dop 1 liter		WPE014 Gekleurd glas fles nauwhals rode dop 500 ml
	WPE015 Gekleurd glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter		WPE016 PET pot wijdhals zwarte dop 500 ml (HWL)

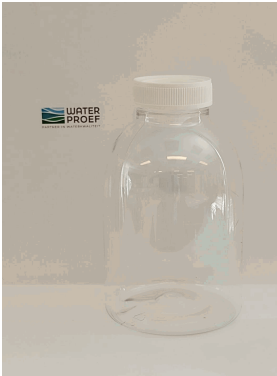
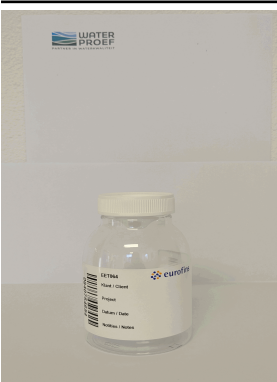
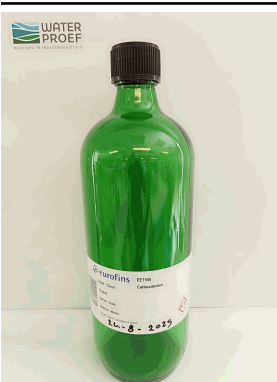
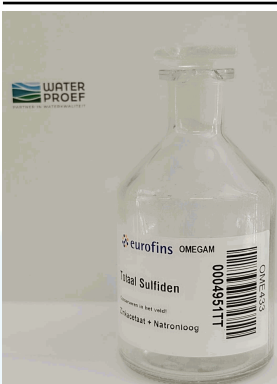
Emballage overzicht

 	WPE017 HD-PE fles nauwhals blauwe dop 100 ml	 	WPE018 HD-PE fles nauwhals gele dop 100 ml
 	WPE019 HD-PE fles nauwhals groene dop 100 ml		WPE020 Niet in gebruik
 	WPE021 HD-PE fles nauwhals rode dop 100 ml	 	WPE022 HD-PE fles nauwhals witte dop 100 ml
 	WPE023 HD-PE fles nauwhals zwarte dop 100 ml (OME470, EET062)	 	WPE024 HD-PE fles nauwhals zwarte dop 100 ml

Emballage overzicht

 	WPE025 HD-PE fles nauwhals zwarte dop 250 ml	 	WPE026 HD-PE pot wijdhals groene dop 1 liter
 	WPE027 HD-PE pot wijdhals blauwe dop 500 ml	 	WPE028 HD-PE pot wijdhals rode dop 500 ml
 	WPE029 PE-LD doorzichtige zak 250 ml	 	WPE030 Gekleurd glas fles nauwhals rode dop 1 liter (OME424, EET510)
 	WPE031 PET fles nauwhals witte dop 125 ml (EET515)	 	WPE032 PET pot wijdhals witte dop 250 ml

Emballage overzicht

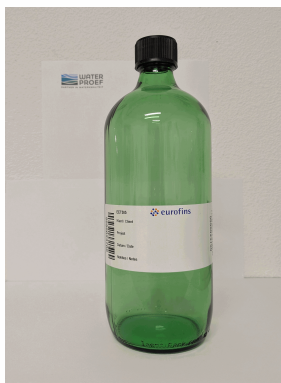
	WPE033 PET pot wijdhals witte dop 400 ml (EET610)		WPE034 PET pot wijdhals witte dop 500 ml
	WPE035 PET pot wijdhals witte dop 250 ml (OME490, EET064)		WPE036 PP emmer rood deksel 10 liter
	WPE037 Gekleurd glas fles nauwhals zwarte dop 1 liter, Azijnzuur (OME429, EET550)		WPE038 PVC pot wijdhals zwarte dop 200 ml
	WPE039 Gekleurd glas fles wijdhals witte dop 40 ml (EET067)		WPE040 Blank glas fles nauwhals glazen dop 250 ml (OME433, EET555)

Emballage overzicht



WPE041

Blank glas fles
nauwhals zwarte dop
250 ml
(OME432,EET590)



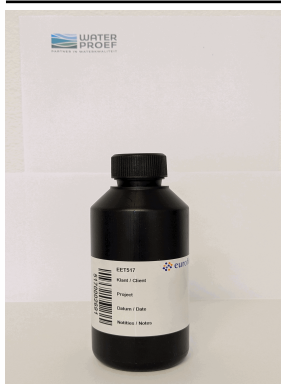
WPE042

Gekleurd glas fles
nauwhals zwarte dop 1
liter (OME422, EET505)



WPE043

Gekleurd glas fles
nauwhals zwarte dop
500 ml (RWS)



WPE044

HD-PE zwarte fles
nauwhals zwarte dop
250 ml (OME408,
EET517)



WPE997

verpakking 100 ml niet
standaard



WPE998

Verpakking voor
aangeleverd extract



WPE999

Overige